

ZOLL AED 3™

Stručná úvodní příručka



ZOLL®

Vítáme vás

Děkujeme vám, že jste si vybrali automatický externí defibrilátor ZOLL AED 3™, který dnes představuje nejvyspělejší zařízení svého druhu na světě. Podle těchto jednoduchých pokynů jej nastavíte během pouhých několika minut. Po dokončení postupu nastavení si poznamenejte sériové číslo svého defibrilátoru AED 3 a prostřednictvím webových stránek www.zollaed3.com pak defibrilátor zaregistrujte, abyste mohli využít prodlouženou záruku, která je na něj poskytována.

Máte-li jakékoli dotazy nebo nejasnosti, obraťte se na společnost ZOLL – využijte telefonní číslo +1 978 421 9655 nebo e-mailovou adresu tservice_master@zoll.com, případně se obraťte na autorizovaného distributora, u kterého jste defibrilátor AED 3 zakoupili.

Obsah

Složka s dokumentací:

- Stručná úvodní příručka
- Osvědčení o aktivaci služby PlusTrac™
- Referenční příručka / plakát pro záchranáře používající defibrilátor ZOLL AED 3
- Návod k obsluze defibrilátoru ZOLL AED 3

V obalové krabici:

- ZOLL AED 3
- Složka s dokumentací
- Elektrody CPR Uni-padz™
- Baterie ZOLL AED 3

Úplná registrace defibrilátoru AED

Přihlaste se ke stránkám: www.zollaed3.com, abyste mohli:


- Provést registraci, která vám umožní využívat bezplatnou prodlouženou 2letou záruku
- Nastavit svůj účet uživatele služby PlusTrac za použití osvědčení o aktivaci služby PlusTrac Activation*, které vás opravňuje k bezplatnému využívání služby PlusTrac po dobu prvního roku
 - Sledování připravenosti přístroje AED 3
 - Sledování výcviku vašich poskytovatelů rychlé zdravotnické pomoci
 - Online správa programu AED
 - Přijímání elektronických připomenutí a výstražných upozornění
- Nastavení defibrilátoru AED 3 tak, aby pravidelně odesílal zprávy s výsledky autotestů do střediska služby PlusTrac prostřednictvím vaší místní sítě Wi-Fi
- Přijímat informace o nastavení svého účtu ZOLL Online Account k odesílání dat klinických událostí do systému ZOLL Case Review™ a ke správě těchto dat v tomto systému

* Osvědčení o aktivaci je obsaženo ve složce s dokumentací


Nastavení defibrilátoru ZOLL AED 3




Vyjměte veškerý obsah z přepravního obalu.

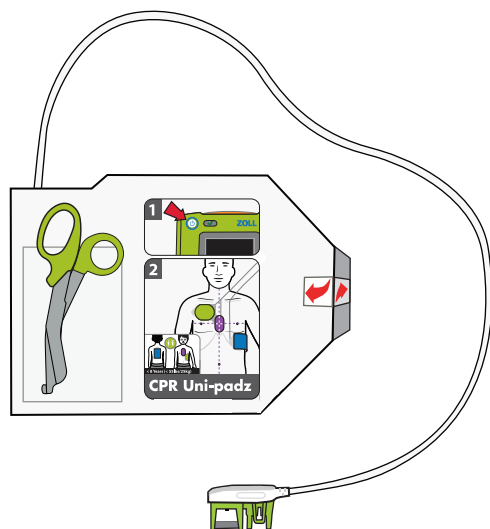


Vyjměte elektrody CPR Uni-padz z ochranné krabice.

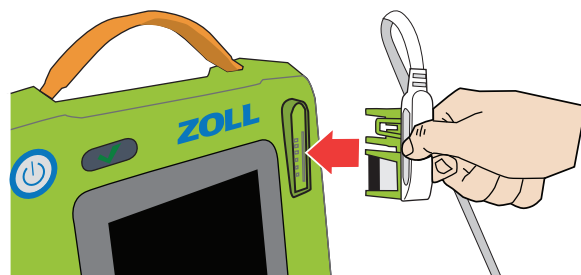


Zasuňte konektor kabelu elektrod CPR Uni-padz do portu pro připojení elektrod na defibrilátoru AED 3.

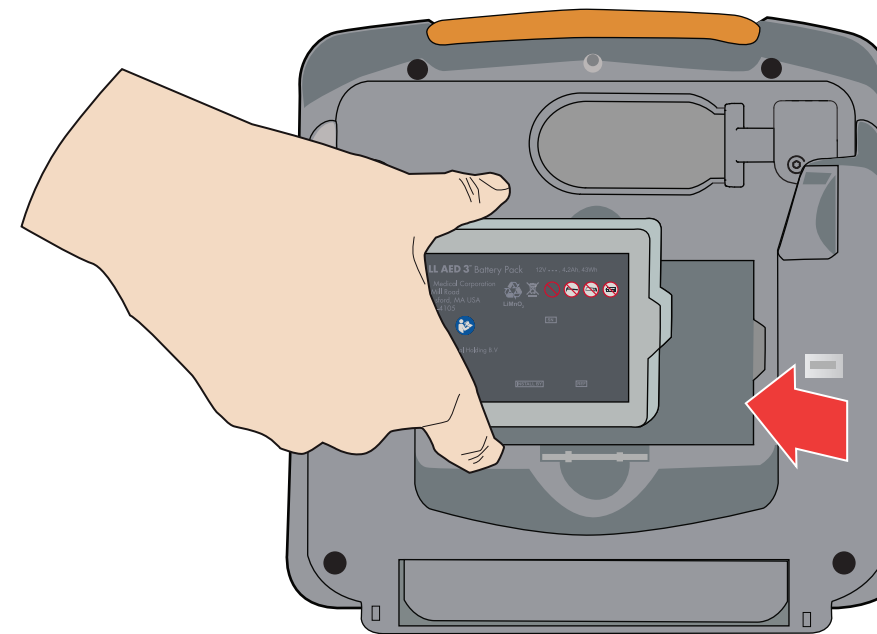

Vyjměte baterii AED 3 z přepravního obalu. Baterii uchopte za boční výstupky tak, aby štítek směřoval ven. Vložte baterii do přihrádky na zadní straně defibrilátoru AED tak, aby slyšitelně zapadla. Přitom je třeba vzájemně vyrovnat zářez na konci baterie s odpovídajícím tvarem ve stěně přihrádky na baterii.

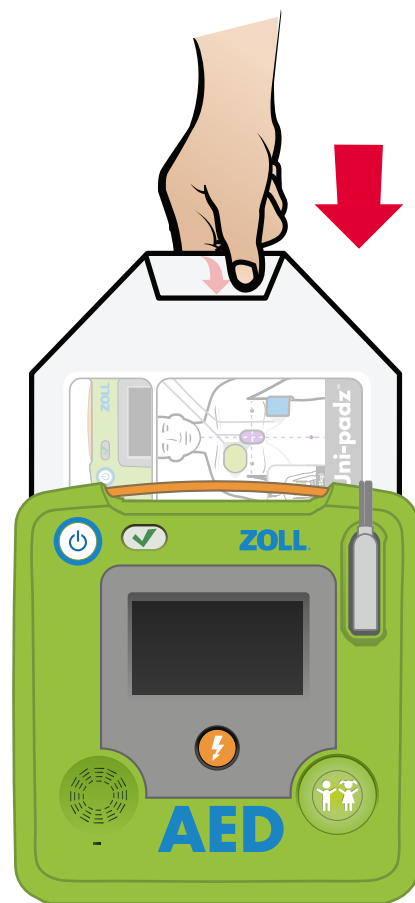

Defibrilátor ZOLL AED 3 provede vlastní automatický test (autotest). Dokud probíhá autotest, zasuňte sadu elektrod CPR Uni-padz do přihrádky na zadní straně defibrilátoru AED tak, aby štítek na obalu směřoval k vám.

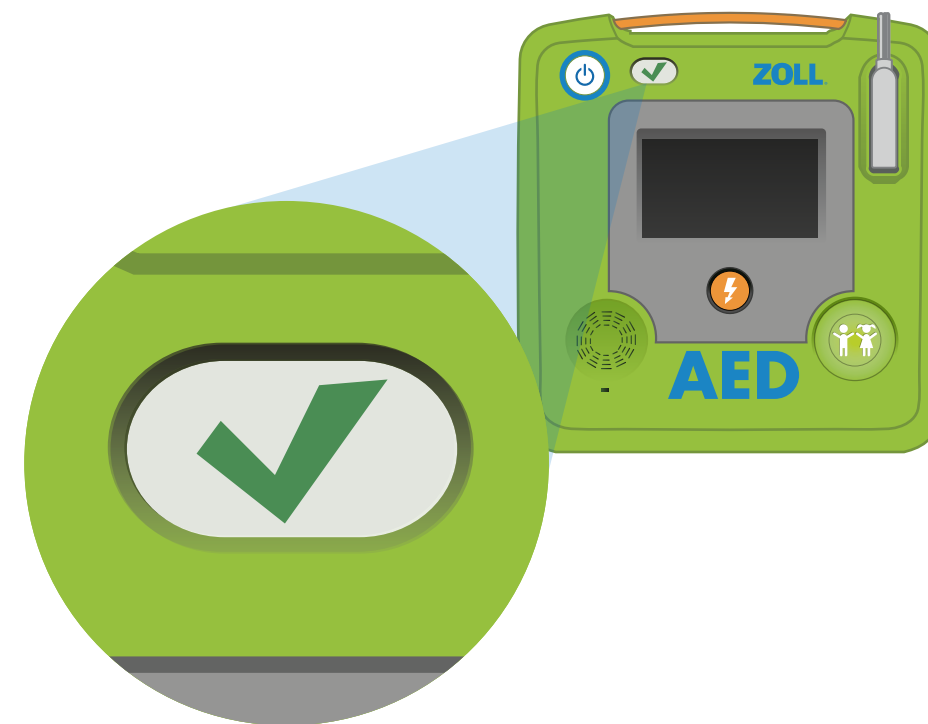

Po dokončení autotestu defibrilátoru AED 3 zkontrolujte, zda tento test proběhl úspěšně, o čemž informuje vydání hlasové výzvy „JEDNOTKA JE V POŘÁDKU“ nebo zobrazení zeleného symbolu zaškrtnutí v okně stavového indikátoru. Defibrilátor AED 3 je nyní připraven k použití. Máte-li jakékoli dotazy, nahlédněte do návodu k obsluze, který je obsažen ve složce s dokumentací.

Dotazy:

Obrátte se na oddělení technických služeb společnosti ZOLL
nebo na příslušného místního zástupce společnosti ZOLL

Oddělení technických služeb společnosti ZOLL:

Telefon: +1-978-421-9655

E-mail: tservice_master@zoll.com