

ZOLL AED 3™

Rövid útmutató



ZOLL®

Üdvözljük!

Köszönjük, hogy a ZOLL AED 3™ automata külső defibrillátor mellett döntött, ezzel a világ jelenlegi legfejlettebb AED készülékét választva. Az alábbi egyszerű lépéseket követve néhány perc alatt beállíthatja AED 3 készülékét. Ha elvégezte a beállítást, jegyezze fel a készülék sorozatszámát, majd jelentkezzen be a www.zollaed3.com weboldalra, hogy regisztrálja AED 3 készülékét a meghosszabbított jótállás érdekében.

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, kérjük, hívja a ZOLL ügyfélszolgálatát (+1-978-421-9655) vagy írjon e-mailt (tservice_master@zoll.com), esetleg forduljon a hivatalos forgalmazóhoz, akitől az AED 3 készüléket vásárolta.

Tartalom

Dokumentációs mappa:

- Rövid útmutató
- PlusTrac™ Aktiválási tanúsítvány
- ZOLL AED 3 Segítségnyújtási referencia útmutató/poster
- ZOLL AED 3 Használati utasítás

A dobozban:

- ZOLL AED 3
- Dokumentációs mappa
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3 telep

Az AED regisztrációja

Jelentkezzen be a következő webcímre: www.zollaed3.com, ahol a következőkre lesz lehetősége:


- Regisztrálhatja készülékét a díjmentes 2 éves meghosszabbított jótálláshoz
- Beállíthatja PlusTrac felhasználói fiókját a PlusTrac Aktiválási tanúsítvánnyal*, amellyel az első évben díjmentesen használhatja a PlusTrac szolgáltatást
 - Nyomon követheti AED 3 készüléke készenléti állapotát
 - Nyomon követheti a segítségnyújtók képzését
 - Online kezelheti AED programját
 - Elektronikus emlékeztetőket és riasztási értesítéseket kaphat
 - Engedélyezheti, hogy AED 3 készüléke – a helyi WiFi hálózatot használva – rendszeresen jelentést küldjön az öntesztek eredményéről a PlusTrac szolgáltatásba
- Információt kaphat ZOLL online felhasználói fiókja beállításáról, amellyel feltöltheti és kezelheti a klinikai események adatait a ZOLL Case Review™ szoftverben

*az aktiválási tanúsítvány a dokumentációs mappában található


A ZOLL AED 3 beállítása




Vegyen ki mindent a szállításhoz használt csomagolásból.

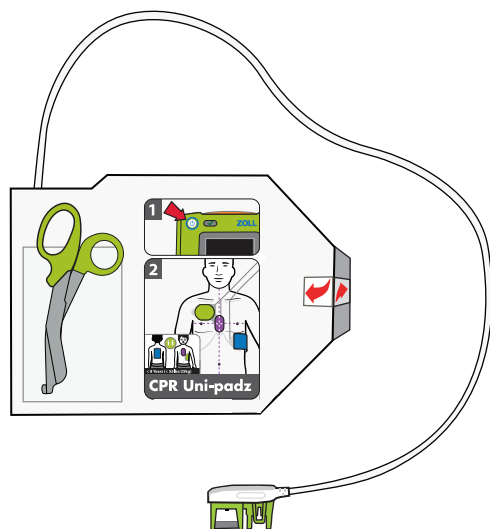


Vegye ki a CPR Uni-padz elektródákat a védődobozukból.

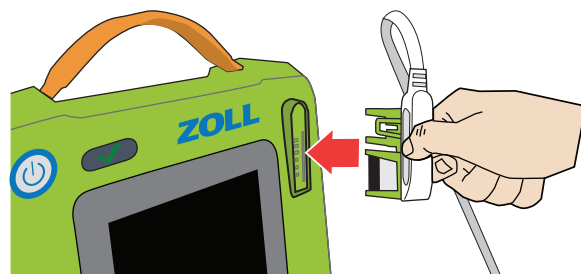


A CPR Uni-padz elektródák vezetékének csatlakozóját helyezze be az AED 3 készülék elektródaportjába.

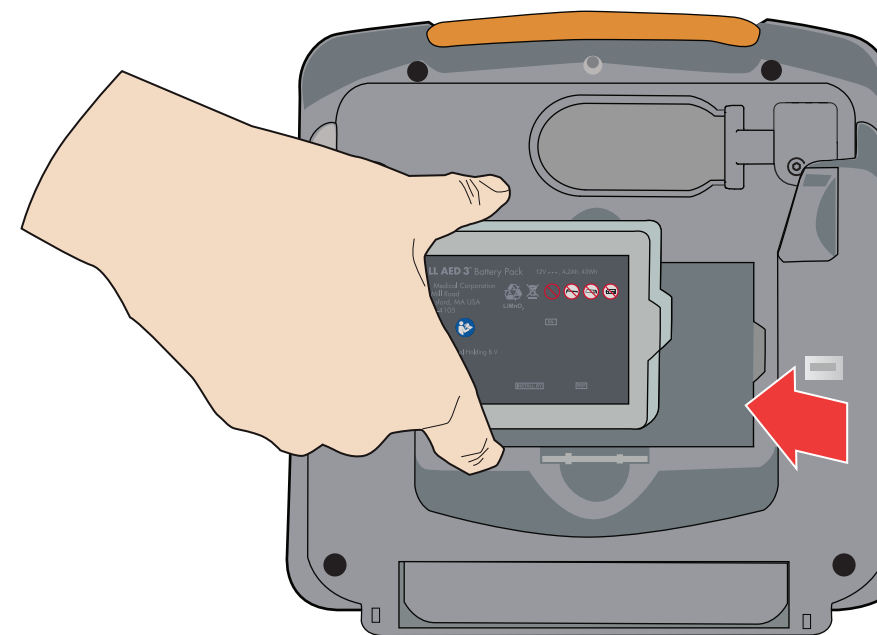

Vegye ki az AED 3 készülék telepét a szállításhoz használt csomagolásból. A telepet az oldalsó rögzítőfüleknél fogja meg úgy, hogy a címke kifelé nézzen. Helyezze be a telepet az AED készülék hátsó oldalán kattánásig olyan módon, hogy a telep végén található túlnyúlás a teleptartó megfelelő mélyedésébe illeszkedjen.

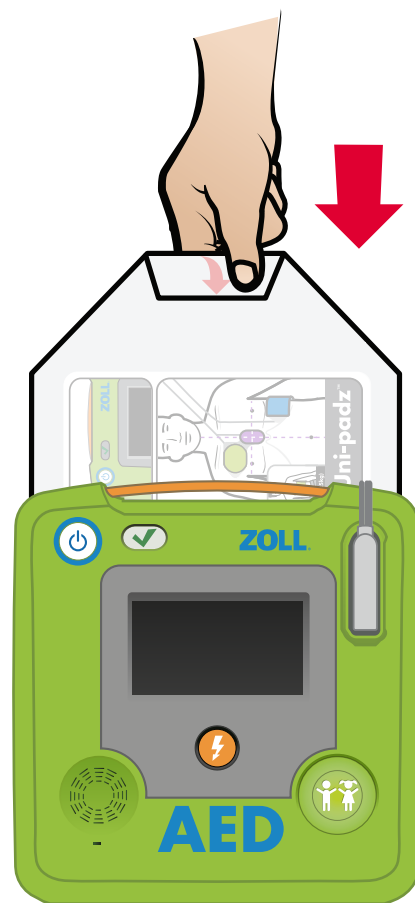

A ZOLL AED 3 automatikusan öntesztet futtat. Az önteszt futása alatt helyezze be a CPR Uni-padz elektródákat az AED készülék hátuljába oly módon, hogy a csomagon lévő címke Ön felé nézzen.

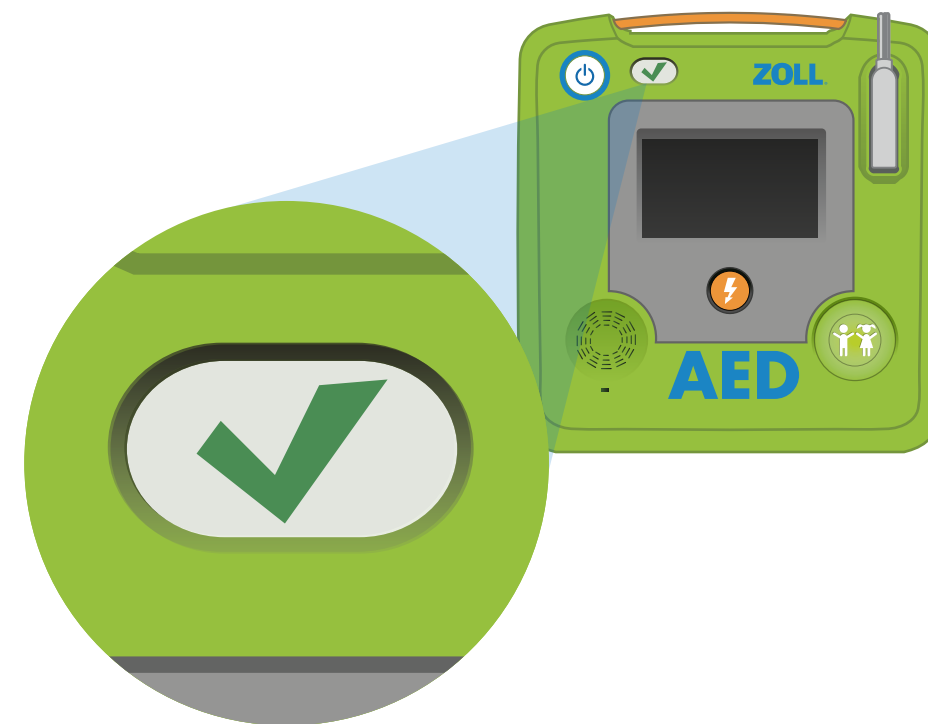

Az AED 3 öntesztje után győződjön meg az önteszt sikerességéről: figyelje, hogy elhangzik-e az „AED KÉSZÜLÉK RENDBEN” hangüzenet, vagy pedig nézze meg, hogy állapotkijelző ablakban megjelent-e a zöld pipa. Ezzel az AED 3 készülék készen áll a használatra. Ha bármilyen kérdése van, olvassa el a dokumentációs mappában található használati utasítást.

Ha kérdése van:

Forduljon a ZOLL műszaki ügyfélszolgálatához
vagy a ZOLL helyi hivatalos képviselőjéhez

ZOLL műszaki ügyfélszolgálat:

Telefon: +1-978-421-9655

E-mail: tservice_master@zoll.com